

SIUI **CTS-7700V**

Grands Animaux
Petits Animaux

LE NOUVEL ARRIVÉ AUX PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES!



- **Image haute résolution: technologie digitale**
- **Clavier ergonomique**
- **Sondes triple fréquence**
- **Moniteur 12 pouces**
- **Double connecteur sondes**
- **Cine Loops**
- **2 ports USB**




Vtrade

SIUI
CTS-7700V
Grands Animaux
Petits Animaux

LE NOUVEL ARRIVÉ AUX PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES!

L'échographe CTS-7700V est le bon choix pour tous les praticiens grands animaux, équin ou petits animaux qui cherchent une machine performante, fiable, robuste à un prix très compétitifs. SIUI utilise sur cet échographe une technologie de sonde à large bande afin de permettre une utilisation à 3 niveaux de fréquence. Grâce à cela, une seule sonde peut couvrir un large spectre d'applications différentes.

En équine par exemple la sonde linéaire rectale peut être utilisée à la fois en gynéco et en examens articulaires et tendineux ! Pour l'utilisation en petits animaux, le constructeur a prévu les fréquences de 4, 5 et 7.5 MHz afin de pouvoir mener les examens aussi bien sur de très gros chiens que sur de jeunes chats.

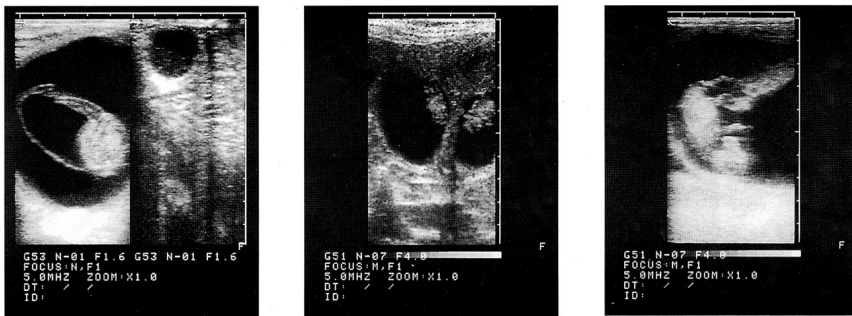

Caractéristiques:

- Balayage linéaire ou micro-convexe
- Différents modes de balayage: B, B/M, B+B, M
- Cineloop 64 écrans en mode B et 256 sec en mode M
- Fréquences de sonde disponibles: de 4 à 10MHz
- Focus électronique: 4 niveaux de focalisation avec ouverture variable
- Zoom: x1, x1.5, x2 et possibilité de déplacer l'image vers le bas et vers le haut
- Traitement de l'image: pré-processing, corrélation-processing, interpolation
- Mesures et calculs: distance, surface, contour, rythme cardiaque, durée de gestation
- Mode d'affichage: gauche-droite et haut-bas
- Affichage écran: ID, date, heure, fréquence, gain, zoom, focus, commentaire, ...
- Alimentation électrique: 110/220V, 80VA
- Poids 11 Kgs
- Taille 405x295x260MM
- Transfert d'images en JPEG, BMP ou TIFF par sortie RS 232C

Configuration standard:

- Unité centrale
- Sonde rectale 5 - 7.5 - 10MHz et/ou microconvexe 4 - 5 - 7.5MHz
- Housse anti-poussières, câble, mode d'emploi

Options:

- Imprimante vidéo
- Sortie DICOM 3 pour intégration dans un logiciel PACS
- Guide sonde
- Trolley

Vtrade 

 Z.I. de Noville-les-Bois
 1 rue de la Tour (Bât. 31)
 B-5380 Fernelmont (Belgium)

 Tél.: +32 (0)81 56 78 58
 Fax: +32 (0)81 56 92 32
 E-mail: info@vtrade.be

www.vtrade.be