

Matrix

**Knaagdieren
Kleine Huisdieren**

GEHEEL VAN CIRCULAIRE MATRIX VERDOVING : TYPE VMS : STANDAARD MODEL
- DE BESTE REFERENTIE -


- **Verdovingstoestel en handventilatie** voor dieren van 1 tot 200 kg
- **Robuust en compact** dankzij zijn modulariteit laat hij de verdoving en de handventilatie toe van de zeer kleine dieren (konijnen, katten) alsook van de grotere dieren zoals honden, varkens,... tot 200 kg
- **Open-Gesloten of Half-Gesloten circuit**
 - Flush O₂ voor een dringende toevoeging van O₂
- **Canister 1500cc gemakkelijk demonteerbaar**
- **Statiefmodel V918070** met mogelijkheid om de zuurstoffles vast te maken V933387 of **muurmodel V918166** met een draaiende arm van 130 graden en een afstand van 20cm van de muur



Muurmodel V918166



Statief V918070

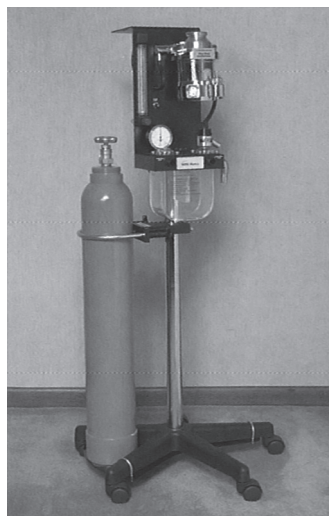

V933387

Optie

- V933387 Cylinder plaatsing kit voor gasfles

Garantie 3 jaar

Mogelijkheid om een zuurstof concentrator aan te koppelen.
Kroeber: stil: de laagste dB op de markt
V127300



Vtrade 

Z.I. de Noville-les-Bois
1 rue de la Tour (Bât. 31)
B-5380 Fernelmont (Belgium)

Tél.: +32 (0)81 56 78 58
Fax: +32 (0)81 56 92 32
E-mail: info@vtrade.be

www.vtrade.be

Matrix

**Knaagdieren
Kleine Huidieren**

Het geheel VMS omvat :

- Manometer -60 tot +60cm H2O
- Debimeter 0.2 tot 4l/min met dubbele visualisatie, normaal of vergroot door middel van een rotatie.
- Het uitgeruste cirkelcircuit :
 - * Doos met kalk 1500cc met quick systeem release
 - * Veiligheidsklep om de druk te verminderen
 - * Inspiratie en expiratie kleppen gemakkelijk demonteerbaar
 - * Ballon 1 en 2 L
- Patienten circuit diam 15mm (V913419) en 22mm (V913420C).
- Bijkomende luchtklep die ambiante lucht neemt als de ballon samengeperst is
- Verbindingsstuk veiligheidsklep
- Verbindingsstuk N2O / O2



V913418

Opties

- V913418 Isofluraan Verdampfer type TEC3 0 tot 5%
- V913421 Refill key
- V915171 Afvoerbuis isofluraan dampen.
- V923297 Canalisatie O2: 2 meter.



V913421



V923297



V915171



V127429

- V127429 Halogeen Dampen Absorber
- V128118 Verbindingsstuk 15/22mm
- V913415 Patienten circuit Bain 22mm 1.6m
- V913415 Patienten circuit minder dan 5 Kg
- V127417 Zuurstofontspanner O2



V128118



V913415 +
V1281102



V913416 + V923073



V127417



V923073
FS-2 Adapter Ausgang
Verdampfer



V127405
Absorbeeralk