

**SIUI**  
**CTS-7700V**

*Grote dieren  
Kleine Huisdieren*

NIEUW GEKOMEN MET INDRIJKWEKKENDE PRESTATIES!



- **Hoge resolutie beeld: digitale technologie**
- **Ergonomisch keyboard**
- **Drievoudige frekwentie sondes**
- **12inch monitor**
- **Dubbel sondes connector**
- **Cineloop**
- **2 USB poorten**



# SIUI


## CTS-7700V

**Grote dieren**  
**Kleine Huisdieren**

### NIEUW GEKOMEN MET INDRIJKWEKKENDE PRESTATIES!

De scanner CTS-7700V is de goede keus voor alle dierenartsen (paarden of kleine huisdieren) die een krachtige, betrouwbare, robuuste machine tegen een zeer concurrerende prijs zoeken. SIUI gebruikt op dit toestel een technologie van sonde aan brede reep teneinde een gebruik op 3 niveau's van frequentie toe te laten. Dankzij dat kan één sonde alleen een breed spectrum met verschillende toepassingen bedekken.

Voor paarden bijvoorbeeld, kan de rectale lineaire sonde zowel in gynaecologie als in gewrichts- en pees- onderzoeken gebruikt worden! Voor het gebruik in kleine dieren, heeft de fabrikant de frequenties van 4, 5 en 7.5 MHz voorzien teneinde de onderzoeken te kunnen evengoed leiden op zeer grote honden als op jonge katten.

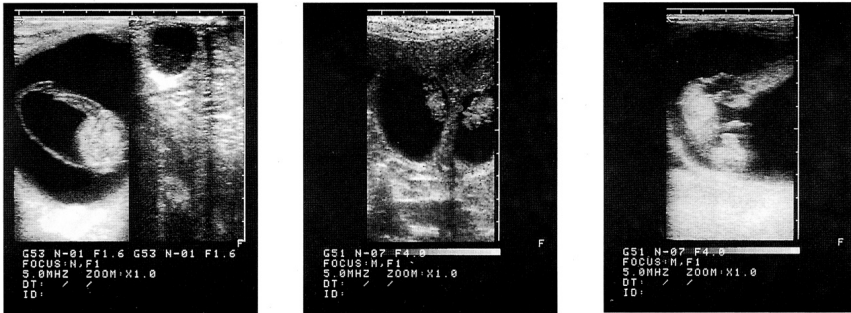

#### Eigenschappen:

- Lineair of micro-convexe Scansysteem
- Schermmogelijkheden: B, B/M, B+B, M
- Cineloop 64 schermen in B mode en 256 sec in M mode
- Frequentie Sonde: 4MHz tot 10MHz
- Elektronische Focus: 4-staps focus met variabele opening
- Zoom: x1, x1.5, x2 als ook de diepte shift
- Beeldverwerking: pre-processing, correlation-processing, interpolation
- Meten & berekenen: Afstand, Zone, Omtrek, Hartslag, Zwangerschapsduurbepaling
- Display Mode: Links/Rechts, Boven/Onder and Centraal
- Schermweergave: ID, Datum, Tijd, Frequentie, Gain, Zoom, Focus, Commentaar, ...
- Netvoeding: 110/220V, 80VA
- Gewicht : 11 kgs
- Afmetingen : 405x295x260MM
- Overdracht van beelden in JPEG, BMP of TIFF per output RS 232C

#### Standaard Uitrustung:

- Basisunit met digitale beeldconverter
- 5MHz of 7.5MHz transrectale Lineaire sonde EZU-PL22V
- Stofvrij hoes, kabel, Handleiding

#### Opties:

- Video Printer
- DICOM 3 output voor integratie in een PACS software
- Naaldbegeleiding
- Mobiele Trolley

