

ActiVitor

Paarden

SHOCKWAVE-THERAPIE
EEN NIEUWE BEHANDELINGSMETHODE IN DE DIERGENEESKUNDE!





V440200

Principe

Het lokaal toedienen van zeer korte maar krachtige hoogenergetische schok-golven stimuleert het genezingsproces. De therapie is goedkoop en produceert geen bijwerkingen.

Gefocaliseerde golven

ActiVitor heeft een unieke technologie ontwikkeld waarbij de shockwave hydroelectrisch wordt geproduceerd! Deze methode genereert gefocuseerde golven. Gefocuseerde schokgolven hebben het voordeel dat ze energie toebrengen waar het moet en in een volume van enkele cm³. Typisch een cylinder van 7mm diameter en 40 mm lang
Enkel zieke weefsels worden bij deze methode behandeld!

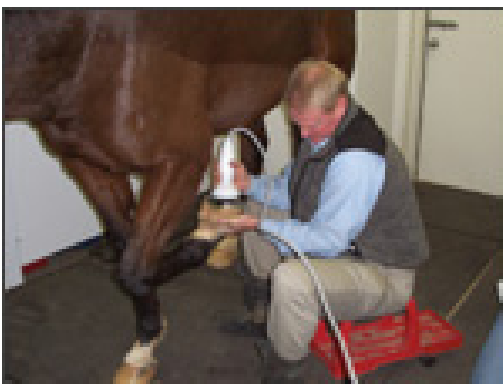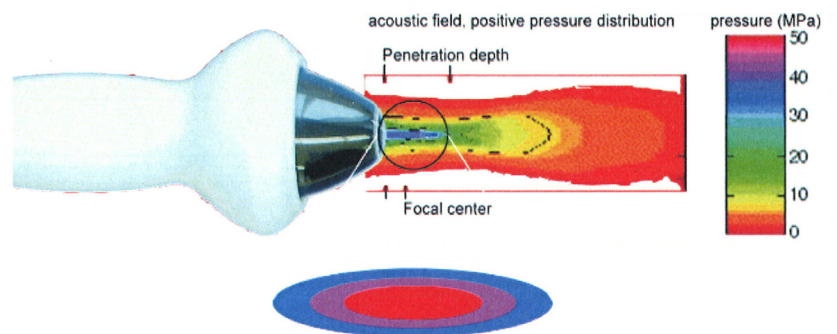

Toepassingen :

- **Arthrose (knie, ellebogen, ...)**
- **Peesblessures**
- **Botbreuken**
- **Straalbeen-ziekten**
- **Spondylose van de rug**
- **Enz.....**

Vtrade



ActiVitor

Paarden

Mecanisme

Schokgolven zijn zeer korte maar intense geluidsgolven. Deze produceren positieve en negatieve druk op de weefsels die ze tegen komen. De oscillerende drukgolven stimuleren weefselgroei : bot of zachte weefsels. Schokgolven bevorderen ook de verdwijning van verkalkingen. Schokgolven toegediend met onze ActiVitor veroorzaken veranderingen in het metabolisme van de cellen en stimuleren vascularisatie van de weefsels. Shockwave-therapie is nog niet gekend door het grote publiek, maar verschillende experts en orthopedisten maken reeds efficiënt gebruik van deze nieuwe behandelingsmethode.

Een nieuwe behandelingsmethode voor U!



Technische gegevens:

Gebruiksvriendelijkheid

Wordt in optie geleverd in transportkoffer

Apparaat

| | |
|--------------|--|
| Gewicht | 16 Kgs |
| Afmetingen | 473x426x219 mm |
| Instellingen | 6 energie niveaus Ratie van 30 tot 240 schokken per minuut Aantal schokken |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Sondes | focale penetratie |
| ActiTrode D00 | 0 - 5 mm «Flat wave» Nieuw |
| ActiTrode D05 | 0 - 25 mm |
| ActiTrode D20 | 5 - 40 mm |
| ActiTrode D35 | 15 - 55 mm |
| ActiTrode D80 | 50 - 110 mm |

Levensduur van de sondes tot refurbishing: 50.500 schokken.

